

Guide de référence rapide OxyHome®

1. Utilisation du bouton Pause

Appuyez sur Pause lorsque vous prenez une courte pause du concentrateur. Cette fonction arrête l'alimentation en oxygène et continue de refroidir le compresseur pour améliorer la longévité. Appuyez à nouveau sur pause pour reprendre le fonctionnement.

2. Bouton marche/arrêt de l'alarme

Maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour désactiver ou réactiver l'alarme.

Veillez noter : si l'alarme est mise en sourdine, elle ne sera audible qu'une fois rétablie ou jusqu'à ce que la machine soit éteinte puis rallumée.

3. Bouton minuterie

Maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour activer la fonction minuterie. La minuterie peut être réglée jusqu'à 300 minutes par incréments de 10 minutes.

4. Vérification de la pureté

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Pause » pendant 5 secondes pour afficher Pureté.


5. Voyants lumineux

Il y a 4 voyants lumineux sur l'appareil :

1. Indicateur de faible pression de sortie (basse pression) : la pression de sortie est inférieure à 2,2 psi, le voyant clignote en jaune toutes les deux secondes et une alarme retentit.
2. Indicateur de faible pureté de l'oxygène (Low Conc.) : Si la concentration en oxygène descend en dessous de 82 % (V/V), le voyant clignote en jaune et l'alarme retentit.
3. Indicateur de perte de courant (panne de courant) : en cas de panne de courant, le voyant clignote en jaune toutes les 2 secondes et l'alarme retentit.
4. Indicateur d'état d'alimentation : lorsque le concentrateur est sous tension, le voyant reste vert fixe si le concentrateur fonctionne normalement.

6. Alarmes

Numéro d'article.	Type d'alarme	Priorité	Signaux d'alarme/voyant lumineux			Auditif Oui/Non	Retard/s de condition d'alarme	Délai/s de génération du signal d'alarme
			Couleur	Fréquence de clignotement	Taux d'occupation			
1	Alarme de panne d'alimentation	Avec	Jaune	Clignote tous les deux secondes	50%	Oui	5s	5s
2	Alarme d'échec de démarrage	Avec	Jaune	Clignote tous les deux secondes	50%	Oui	5s	5s
3	ALARME de faible concentration en oxygène (sans démarrage)	Avec	Jaune	Clignote tous les deux secondes	50%	Oui	5 s	5s
4	Alarme de manque de pression	Avec	Jaune	Clignote tous les deux secondes	50%	Oui	5 s	5s
5	Pas d'alarme de débit	Avec	À l'écran	Clignote tous les deux secondes	N/A	Oui	5 s	5s
6	Alarme de faible débit	Avec	À l'écran	Clignote tous les deux secondes	N/A	Oui	10 s	5s

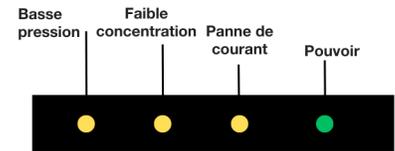

#2400-5100

7. Filtres de remplacement

Numéro d'article	Description
1170-5401	Filtre d'armoire en mousse de remplacement pour concentrateur stationnaire OxyHome de 5 litres
1170-5402	Filtre d'entrée HEPA/compresseur de remplacement pour OxyHome 5 litres Conc. stationnaire.